



HOW TO USE OPERA'S PUMPING MODES

Vacuum strength and cycle speeds can be adjusted manually and uniquely for either breast, enabling a personalized experience.

Recommended Settings

It is generally recommended to start in Massage Mode on Cycle 100 / Vacuum 1, and slowly increase the vacuum until you have reached a letdown and the milk has started flowing. Once this happens, switch to Expression Mode starting on Cycle 42 / Vacuum 4 or 5 (or whatever level you were using in Massage Mode).

Feel free to customize the vacuum on each side according to each breast's needs.

It is recommended to use the alternate mode when double pumping for a sooner let down.

It is recommended to use the Alternate mode during your full pumping session for those moms that need extra stimulation to increase their milk supply.

Changing Modes



Press this button to quickly change modes. Single Left, Single Right, Alternate, and Synchronous

The current pumping mode will be displayed on the top-right corner



Toggle between EXPRESSION and MASSAGE by pressing this button.

ADJUSTING BOTH SIDES AT THE SAME TIME

When Opera is in **SYNCHRONOUS** or **ALTERNATE** mode, adjusting the vacuum or cycle will increase or decrease both sides at the same time.

SYNCHRONOUS mode express both breasts at the same time.

ALTERNATE mode express both breasts in an alternate pattern.

SYNCHRONOUS MODE



Increasing or decreasing the vacuum level and/or cycle will affect both sides.

ALTERNATE MODE



Screen will show vacuum level and cycle for both sides.

ADJUSTING ONE SIDE ONLY

Opera's dual motors technology allows moms to adjust each side independently.

Press **MODE** to select the side you want to use. (Left or Right)

Once the side is selected, you can modify the vacuum level and cycle for that side.

SINGLE L MODE



Increasing or decreasing the vacuum level and/or cycle will affect the currently selected side only.

SINGLE R MODE



Screen will show the current vacuum level and cycle for the selected side.


USING DIFFERENT SUCTION LEVELS ON EACH SIDE WHILE DOUBLE PUMPING

Once you have adjusted each side to your preference, you can press **MODE** to select **SYNCHRONOUS** or **ALTERNATE** mode.

Opera will keep the vacuum level selected for each side. However, cycles will be the same for both sides.

Opera will use the lowest cycle setting for both sides.

Increasing or decreasing the vacuum level and/or cycle will affect both sides. But the difference in suction level between sides will remain

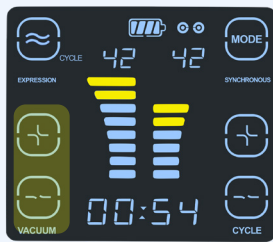

Once one side reached max vacuum level, if you keep increasing the level it will only affect the side that had a lower level until both sides reach the maximum level.

The same will happen if you decrease the vacuum level. The difference in vacuum will remain until both reach the lowest level. (0)

SYNCHRONOUS OR ALTERNATE MODE



Want to learn more about Opera ?

SCAN ME



Escan the QR code to see instructional videos on how to use, assemble and sanitize your Opera pump.

Or visit: www.unimomus.com/pages/opera-videos

For more information visit www.Unimomus.com



OPERA: COMO USAR LOS DIFERENTES MODOS

Opera brinda una mayor personalizacion ya que permite ajustar los niveles de succion y ciclos independientemente para cada lado.

Ajustes Recomendados

En general, se recomienda comenzar en modo masaje ciclo 100 / succion nivel 1 y aumentar lentamente el nivel hasta que la leche haya comenzado a fluir.
Una vez que esto suceda, cambie a modo de expresi3n comenzando en el ciclo 42 / succion nivel 4 o 5 (o el ultimo nivel que estuviera usando en el modo de masaje).
Si3ntase libre de personalizar la succion en cada lado de acuerdo con las necesidades de cada seno, a continuacion le explicaremos como hacer esto.
Se recomienda utilizar el modo alternativo para lograr que la leche fluya mas rapido.
El modo alternativo tambien es recomendado para las mujeres que necesitan una mayor estimulacion para aumentar la produccion de leche.

Cambiar Modos



Presione este boton para seleccionar los diferentes modos que Opera ofrece.
Single Left (Solo izquierdo), Single Right (Solo derecho), Alternate (Alternado), y Synchronous (Sincronizado)
El modo activo se mostrara en la pantalla.



Use este boton para cambiar entre las fases de EXPRESSION (Extracci3n) y MASSAGE (Masaje)


AJUSTAR AMBOS LADOS A LA VEZ

Cuando Opera esta en los modos **SINCRONIZADO** o **ALTERNADO** los botones de succion y ciclos controlaran a ambos lados al mismo tiempo.

Modo **SINCRONIZADO (SYNCHRONOUS)** Opera succiona ambos lados al mismo tiempo.

Modo **ALTERNADO (ALTERNATE)** Opera succiona de manera ritmica alternando de un lado a otro.

MODOS SINCRONIZADO

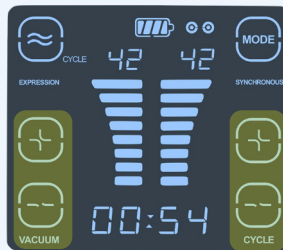

Aumentar o disminuir la succion o los ciclos afectara por igual a ambos lados.

MODOS ALTERNADO



La pantalla mostrara los mismos valores para ambos lados.


AJUSTAR UN LADO SOLAMENTE

Una de las principales caracteristicas de Opera es que permite ajustar cada lado de manera individual.

Para esto, precione **MODE** hasta seleccionar el lado que desea ajustar, ya sea el izquierdo (**SINGLE L**) o el derecho (**SINGLE R**).

Una vez selecciona el lado deseado puede proceder a modificar el nivel de succion o ciclos para ese lado.

SOLO IZQUIERDO

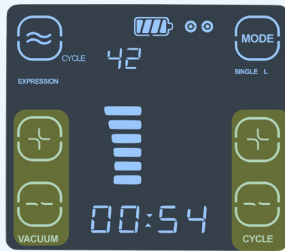

Aumentar o disminuir la succion o ciclos solo afectara al lado seleccionado.

SOLO DERECHO



La pantalla solo mostrara los valores para el lado seleccionado.


USAR DISINTINTOS NIVELES DE SUCCION EN CADA LADO AL TIEMPO

Una vez usted ha ajustado cada lado individualmente a su conveniencia, usted puede presionar **MODE** de nuevo para regresar a los modos **SINCRONIZADO** o **ALTERNADO** y utilizar ambos lados a la vez, manteniendo el nivel de succion que haya seleccionado previamente para cada lado. Sin embargo, Opera utilizara el mismo nivel de ciclos para ambos lados.

Opera seleccionara el menor valor de ciclos seleccionado para ambos.

Si trata de aumentar o disminuir el nivel de succion, este afectara a ambos lados, pero se mantendra la diferencia entre ambos.

Por ejemplo, en la imagen se aumento dos niveles la succion, manteniendo la diferencia que existia antes.

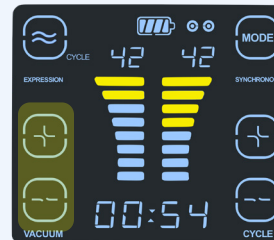


Una vez uno de los lados llego al nivel maximo de succion, si usted sigue presionando el boton de aumentar solo afectara al otro lado hasta que ambos lleguen al nivel maximo.

Lo mismo ocurrira si disminuye el nivel.

Una vez ambos lados llegaron al mismo nivel, la diferencia previa entre ellos desaparece.

MODOS SINCRONIZADO O ALTERNADO

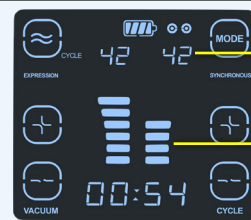

Ciclos iguales

Niveles diferentes

Quiere conocer mas sobre Opera?

SCAN ME



Para videos sobre como utilizar, limpiar y mantener su Opera, escanee el codigo QR con su telefono inteligente.

O visite: www.unimomus.com/pages/opera-videos

Para mas informacion visite www.Unimomus.com